



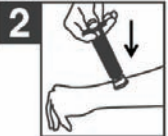

Français

PRÊT A MORDRE, PRÊT A PIQUER
Le Kit 1er secours prêt à agir - Le geste d'urgence anti-venin

MODE D'EMPLOI - IMPORTANT

1. Sélectionnez la ventouse la mieux adaptée à la piqûre ou morsure. Fixez-la à l'extrémité de la pompe. Tirez le piston à fond (à moitié pour un enfant).
2. Appliquez la ventouse sur la blessure.
3. Poussez le piston à fond sans le lâcher avant la fin de la course. Laissez ASPIVENIN® aspirer le venin le temps indiqué pour chaque animal.
4. Retirer ASPIVENIN® en soulevant le piston de la pointe du pouce. Nettoyer la plaie avec un antiseptique. Reprenez au n°2 si la douleur n'a pas disparu à la première aspiration.


NETTOYAGE Seules les ventouses se lavent à l'eau savonneuse. Conserver la pompe à l'abri de l'humidité.



La mini pompe ASPIVENIN® permet de soulager la douleur occasionnée par les piqûres ou les morsures d'animaux venimeux. Aspivenin a été spécialement étudié pour être utilisé d'une seule main. C'est un appareil de premier secours en attendant les soins médicaux indispensables dans les cas graves. Le délai entre la piqûre ou la morsure et l'utilisation de l'ASPIVENIN® conditionne son efficacité. Pour une efficacité optimale de la pompe, il est recommandé de l'utiliser dans les 3 minutes qui suivent la piqûre/morsure. **PRINCIPE** Aspiration sans douleur du venin par vide instantané et permanent 10 fois supérieur à la succion buccale.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser sur les paupières, muqueuses, parties génitales et tympans.

UTILISATION Tous les animaux venimeux et les plantes urticantes. Adapter le temps d'aspiration* suivant le tableau. L'utilisation de la pompe anti-venin ne se substitue pas à la consultation obligatoire et immédiate d'un médecin qui reste indispensable en cas de morsures de serpents, de piqûres de scorpions et de tous autres insectes en cas de réaction importante de la victime.



ANIMAUX	Temps d'aspiration Indicatifs
Guêpe, abeille, frelon...	1 à 3 minutes
Moustique, mouche...	20 à 30 secondes
Vive, méduse, poisson pierre...	2 à 3 minutes
Serpent	3 minutes
Araignée, scorpion	1 à 2 minutes

* l'aspiration peut être renouvelée jusqu'à disparition de la douleur après une pause


CONSEIL D'UTILISATION Afin de ne pas être pris au dépourvu, nous vous conseillons de manipuler votre ASPIVENIN® avant d'en avoir l'utilité en consultant le mode d'emploi. Nous vous conseillons également de le conserver à portée de mains si vous vous trouvez dans un environnement à risques. **ASPIVENIN®** est réutilisable.

Ref 500699 – V201212

Web : www.aspivenin.com - EMail : aspivenin@aspilabo.com

ASPILABO - Rue Pierre Boulanger - 63370 Lempdes - France - Tél. +33 4 73 83 81 50 - Fax : +33 4 73 83 81 51

Fabriqué en France



Recto FRANCAIS

Font titre : Neuropol

Font autre : TimesNewRomanPSMT